

VITA

Digital Dentures: Your Next Level



VITA VIONIC® SOLUTIONS

Fate il passo successivo:
noi vi indichiamo la strada verso la realizzazione
delle protesi digitali – con la massima qualità,
la massima resa estetica e una maggiore
efficienza e flessibilità.





Raggiungete il livello successivo per le vostre protesi digitali

Estetica

I denti preconfezionati VITA VIONIC VIGO con gradiente cromatico tridimensionale, oppure il VITA VIONIC DENT DISC multiColor porteranno le vostre protesi ad un nuovo livello estetico, senza compromessi.

Qualità

Con i materiali giusti, le protesi digitali soddisfano elevati requisiti qualitativi. VITA VIONIC DENT DISC multiColor, ad esempio, convince per la sua resistenza all'abrasione e per la migliore lucidabilità.

Possibilità

I pazienti desiderano una protesi su misura per loro. Per questo le librerie di denti digitali VITA VIONIC propongono 7 possibilità personalizzate di posizionamento.

Efficienza

Le protesi digitali significano efficienza. VITA VIONIC SOLUTIONS propone componenti di sistema per un flusso di lavoro regolare ed efficiente.

VITA VIONIC SOLUTIONS

Digital Dentures: **Your Next Level**



Il fresaggio è attualmente il miglior metodo di produzione delle protesi digitali. Con VITA VIONIC DENT DISC multiColor la resa estetica è semplicemente eccezionale. La transizione degli strati cromatici è incredibilmente fluida. Ora è possibile realizzare denti protesici fresati di alta qualità e dalla grande resa estetica che non hanno nulla da invidiare alle protesi realizzate con i processi analogici.

Eelco van Wort
Dental Design Centrum, Paesi Bassi



La nuova libreria di denti digitale VITA VIONIC DIGITAL VIGO è fantastica. Ci fa risparmiare all'incirca 15 minuti di tempo di costruzione, il che è davvero tantissimo! Con la progettazione creiamo le basi per un flusso di lavoro regolare e prevedibile. Lo consigliamo a tutti: utilizzate la libreria VITA per la progettazione delle protesi digitali.

Frans Delfos
Cordent Group, Paesi Bassi

Protesi totali.

Il vostro flusso di lavoro con VITA VIONIC VIGO®

VITA VIONIC VIGO è lo specialista delle protesi totali digitali. È subito pronto all'uso: adattato all'area basale e con superfici di incollaggio pre-condizionate.

In questo modo VITA VIONIC VIGO si fissa nella base protesica in modo preciso e affidabile. La produzione di protesi totali digitali diventa così altamente efficiente, senza compromessi sulla resa estetica e sulla funzionalità.

Processo CAD

Stampa o fresaggio
del try-in

Realizzazione di basi
protesiche definitive

1

VITA VIONIC VIGO®
Libreria di denti digitale



2

VITA VIONIC® WAX



3

VITA VIONIC® BASE DISC HI



Le mie esigenze

Desidero realizzare protesi totali.



Per me la resa estetica del colore, della modellazione e della brillantezza sono molto importanti.



Desidero usufruire di un materiale su misura per il mio flusso di lavoro digitale.



Cerco un metodo che mi faccia risparmiare tempo e garantisca un processo produttivo sicuro.



Preparazione dei
denti protesici

Fissaggio dei denti
nella base

Individualizzazione

4

VITA VIONIC VIGO®



5

VITA VIONIC® BOND



6

VITAVM®LC flow –
VITA AKZENT® LC



Protesi parziali e totali.

Il vostro flusso di lavoro con VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Versatile nell'utilizzo per protesi parziali e totali, efficiente nella lavorazione, senza compromessi nella resa estetica: VITA VIONIC DENT DISC multiColor convince per il gradiente cromatico perfettamente abbinato alla scala colori VITA.

Gli elementi dei denti realizzati con il disco in composito si caratterizzano per l'elevata resistenza all'abrasione, e per questo sono duraturi come i classici denti protesici VITA.

Processo CAD

Stampa o fresaggio
del try-in

Realizzazione di basi
protesiche definitive

1

VITA VIONIC® DIGITAL VIGO
Libreria di denti digitale



2

VITA VIONIC® WAX



3

VITA VIONIC® BASE DISC HI



Le mie esigenze

Desidero realizzare protesi parziali e totali.



Per me è molto importante ottenere le stesse caratteristiche eccellenti dei materiali dei denti protesici realizzati con i metodi analogici.



Cerco un flusso di lavoro efficiente per quanto riguarda il fresaggio dei denti protesici.



Ho bisogno di flessibilità per adeguare la progettazione dei denti ai casi clinici individuali.



Realizzazione degli
elementi dei denti

Fissaggio dei denti
nella base

Individualizzazione

4

VITA VIONIC® DENT DISC
multiColor



5

VITA VIONIC® BOND




6

VITAVM®LC flow –
VITA AKZENT® LC



1

Libreria di denti digitale.

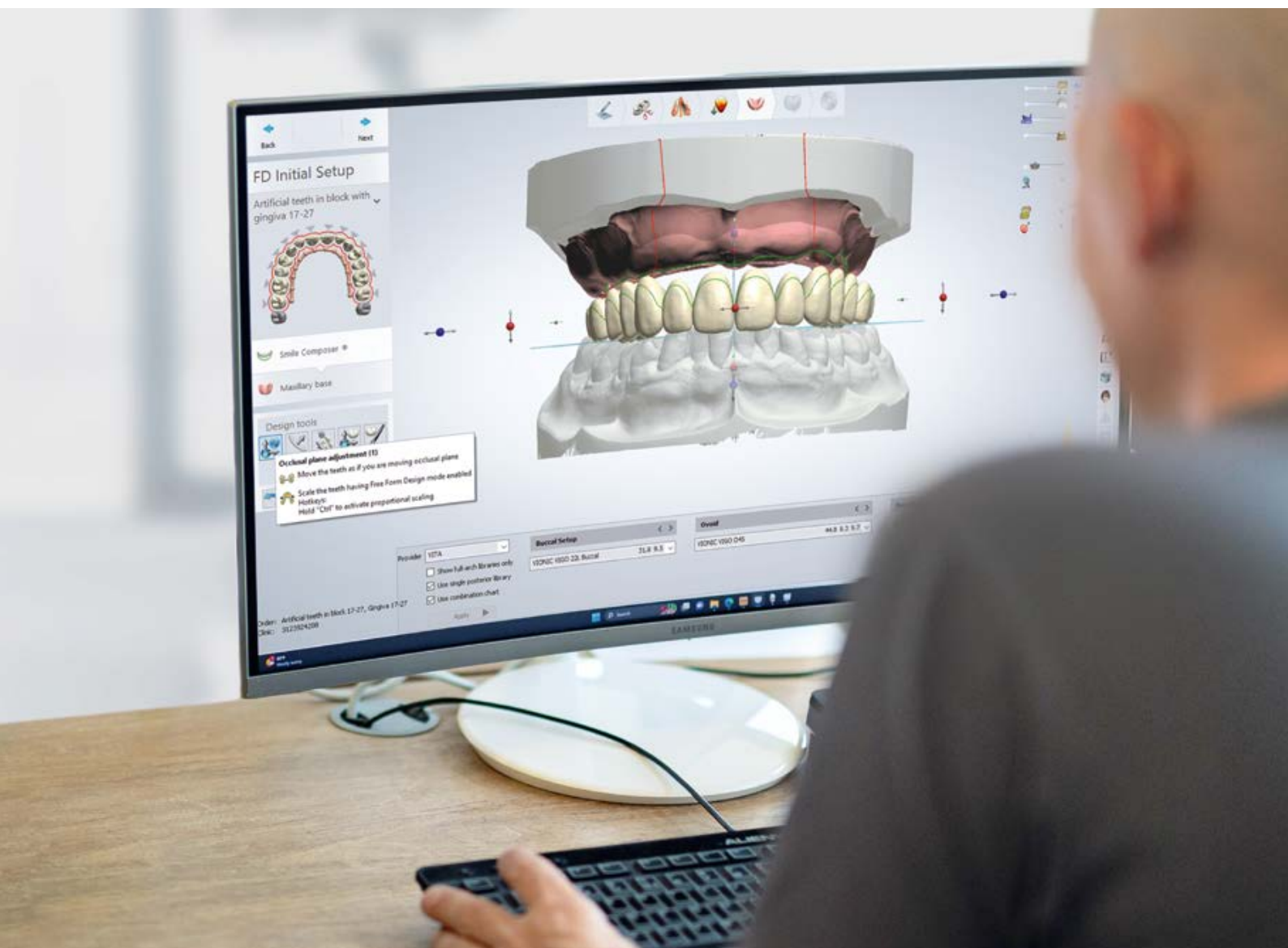

VITA VIONIC VIGO® VITA VIONIC® DIGITAL VIGO

Flessibile

- Per protesi parziali e totali
- 7 concetti protesici incluso il morso incrociato, tutte le classi di occlusione dentale
- Per lavori fresati e stampati

Efficiente

- Una libreria per tutte le possibilità di posizionamento - è quindi impossibile scambiare le linee di denti.
- Design dentale multifunzionale per la facile scelta delle forme più adatte
- Adattamento semplice e rapido delle prime proposte

Le vostre possibilità nel design delle protesi

Impronte multifunzionali: 7 concetti protesici e 4 classi di occlusione dentale riuniti in un'unica libreria



1. Libreria di denti digitale VITA VIONIC VIGO®

Per la progettazione di protesi totali con i denti preconfezionati VITA VIONIC VIGO sono disponibili sette tipologie di montaggio predefinite. In questo modo è possibile realizzare protesi in modo rapido e semplice con l'ausilio di tutti i comuni sistemi aperti di fressaggio e di stampa 3D. Usufruite della competenza di VITA nella progettazione dentale e della più grande scelta di tipologie di montaggio.

2. Libreria di denti digitale VITA VIONIC® DIGITAL VIGO

La versione ampliata della libreria di denti digitale VITA consente inoltre di esportare i dati STL delle protesi montate, sia complessivi (protesi try-in) che separati in elementi dei denti e progetti di basi. A seconda delle esigenze, le protesi create utilizzando geometrie multifunzionali possono essere fresate direttamente dal disco, oppure realizzate in una stampante 3D. VITA VIONIC DIGITAL VIGO schiude così possibilità nuove e flessibili per lavorare in modo digitale.



Per ulteriori informazioni sulla procedura d'ordine consultare il nostro sito

www.vita-zahnfabrik.com/VionicDigitalVigo

2 Creazione di try-in.



VITA VIONIC® WAX

Dischi in cera sintetica indeformabili,
resistenti alla temperatura

- Montaggio in cera confortevole
- Montaggio in cera preciso
- Facile correzione

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito
www.vita-zahnfabrik.com/vionicwax

3 Produzione di basi di protesi definitive.



VITA VIONIC® BASE DISC HI

Disco in PMMA di elevata qualità per la realizzazione di basi di protesi definitive

- Elevata stabilità grazie al materiale resistente agli urti
- Straordinario adattamento alla cresta alveolare
- Nuova gamma di colori gengivali

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito
www.vita-zahnfabrik.com/vionibasehi

4 Inserimento dei denti protesici.



VITA VIONIC® VIGO

Lo specialista delle protesi totali digitali

Estetica

- Stratificazione cromatica tridimensionale e forme vive

Qualità merceologica

- Denti di altissima qualità con materiali dalle proprietà convincenti

Sicurezza di processo


- Design dentale perfezionato per il workflow digitale
- Maggiore produttività grazie al minor tempo necessario per il processo produttivo

Design dentale perfezionato


Denti di dimensioni ridotte,
colletto sabbato



Configurazione basale
priva di sottosquadri

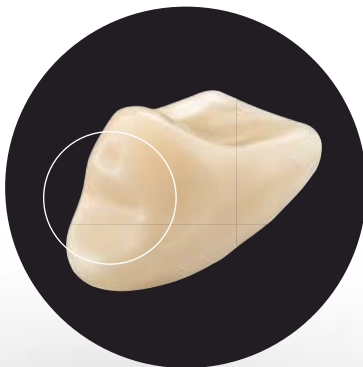


forma cervicale conico-ovale
con protezione antirotazione

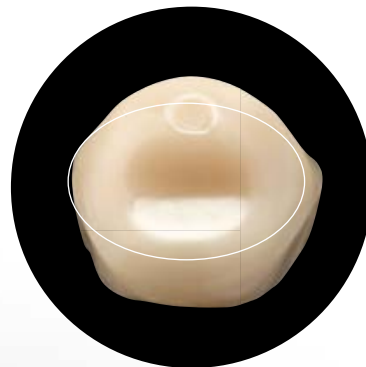

Funzione affidabile

- Funzione Easy-Centric per un lavoro semplice e rapido:
intercuspidazione automatica nella tipologia desiderata
di contatto
- Contempla numerose possibilità di posizionamento

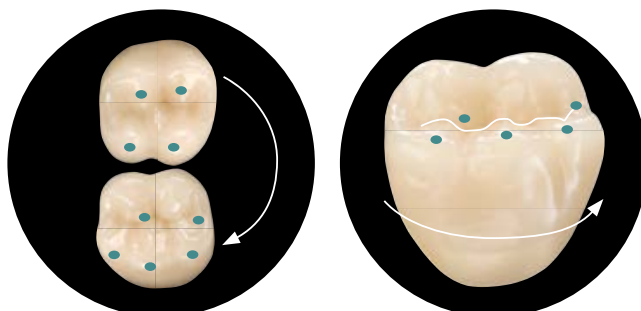



Forma naturale – gioco cromatico affascinante

Forma e tessitura

Tessitura ricca di sfaccettature



Forma naturale




Liste palatali pronunciate




Luminosità dinamica


Traslucenza impressionante

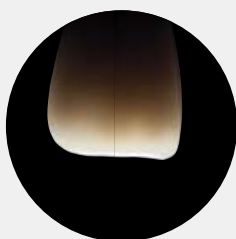

Gioco cromatico di opalescenza

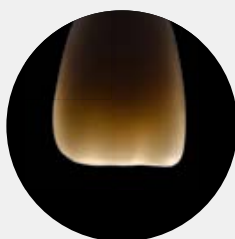

Fluorescenza naturale

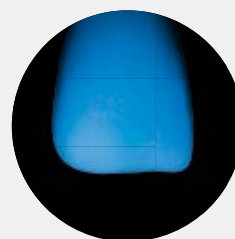

VITA VIONIC VIGO Anteriori Tabella forme	Sup./Nr. mm	R47 47,0	R49 49,0	O45 44,5	T50 49,9	T46 46,2	O43 43,3	T44 44,0	T48 48,3
	Inf./Nr. mm	L37 37,2	L39 39,2	L35 35,2	L39 39,2	L37 37,2	L33 33,2	L33 33,2	L37 37,2
VITA VIONIC VIGO Posteriori Tabella forme	Sup./Nr. mm	22L 31,8	23L 34,3	22L 31,8	24L 35,9	22L 31,8	21L 30,3	21L 30,3	22L 31,8
	Inf./Nr. mm	22L 32,6	23L 35	22L 32,6	24L 36,9	22L 32,6	21L 31	21L 31	22L 32,6

VITA VIONIC VIGO può essere combinato con i più comuni materiali per basi di protesi ed è adatto per tutti i sistemi aperti e convalidati di fresaggio o di stampa 3D.



Per ulteriori informazioni su forme e colori, sui componenti di sistema più adatti e sui partner tecnologici convalidati consultare il sito:
www.vita-zahnfabrik.com/VionicVigo

4 Fresaggio di elementi dei denti.



VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Grezzi da fresare in composito per gli elementi dei denti nelle protesi totali e parziali definitive

Qualità merceologica

- Stabili all'abrasione per denti protesici duraturi

Estetica




- Gradiente cromatico integrato per una maggiore naturalezza
- Buona lucidabilità

Flessibilità

- Lavorazione semplice e sicura
- Compatibili con i più comuni sistemi di fresaggio

Composizione del materiale


VITA VIONIC DENT DISC multiColor, un disco in composito MRP (PMMA con riempitivi inorganici) convince per le caratteristiche dei materiali e la qualità dei denti preconfezionati VITA Premium.

-  **Perle PMMA**
-  **Sostanza di carica silanizzata**
-  **Matrice in reticolante senza MMA**



Qualità verificata

Volume di usura*

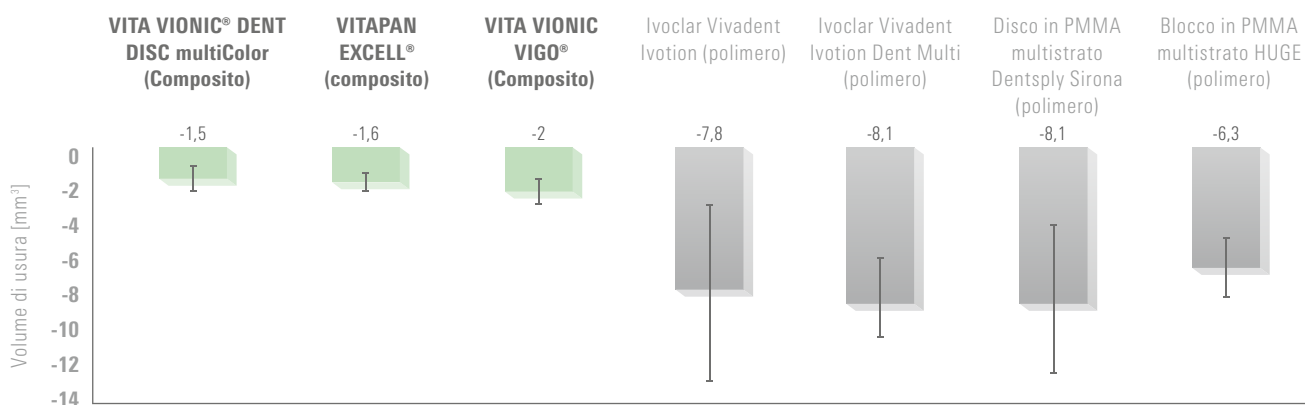


* Fonte: UKR, Clinica universitaria di Regensburg, Policlinico di Protesi Odontoiatrica, n. report 2302_02, 4/2023



Gradiente cromatico integrato

Grazie al suo gradiente cromatico, VITA VIONIC DENT DISC multiColor riproduce il dente naturale su 4 livelli di intensità cromatica. La resa estetica convincente è immediatamente evidente grazie alla buona lucidabilità.

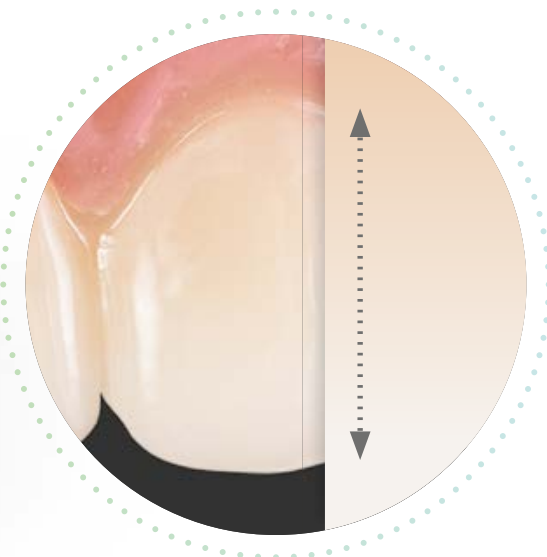

Disponibile nei seguenti colori:

VITA classical A1 – D4®: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3

Colori Bleach: 0M1



I denti prodotti con VITA VIONIC DENT DISC sono assolutamente comparabili con i denti protesici VITA Premium dalla qualità ormai consolidata. Possono essere lucidati perfettamente e, grazie al loro gradiente cromatico, assicurano un'elevata personalizzazione. Per me questo disco è l'anello di congiunzione che porta il mondo della produzione digitale allo stesso livello di quello della produzione analogica.

Arbnor Saraci
HIGHFIELD.DESIGN – Zahntechnik Wichnalek, Germania



Per ulteriori informazioni sui colori, sui componenti di sistema più adatti e sui partner tecnologici convalidati consultare il nostro sito.
www.vita-zahnfabrik.com/VionicDentDisc

5 Fissaggio.



VITA VIONIC® BOND

Un lavoro rapido e pulito per incollaggi sicuri

- Fissaggio adesivo efficiente dei denti protesici e degli elementi dei denti in materiale acrilico (ad es. PMMA) e in composito a base acrilica
- Lavoro semplice e rapido
- Sistema adesivo bicomponente autopolimerizzante per incollaggi sicuri
- Fissaggio preciso e privo di fessure nella cavità grazie al ridotto spessore del film
- Facile rimozione del materiale in eccesso

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito
www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond

6 Finalizzazione, individualizzazione.



VITAVM®LC *flow*

Composito per la chiusura degli spazi interdentali

VITA AKZENT® LC

Sistema di colorazione e glassura per la caratterizzazione opzionale

- Per l'applicazione extraorale su compositi a base acrilica, polimeri e ceramiche ibride
- Elevata resa estetica grazie ai brillanti effetti cromatici e all'ampia gamma di colori per le porzioni dentali e gengivali
- Viscosità perfettamente adattata per il relativo impiego per un lavoro facile ed efficiente

Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito
www.vita-zahnfabrik.com/akzentlc



Soluzioni digitali con la qualità VITA.



VITA VIONIC® WAX

Per la realizzazione di try-in

Colori: white / pink
Geometrie: Ø 98,4 mm/H 30 mm



VITA VIONIC® BASE DISC HI

Per la realizzazione di basi di protesi

Colori: classic pink / classic pink translucent / soft pink
Geometrie: Ø 98,5 mm/H 30 mm



VITA VIONIC VIGO®

Denti protesici preconfezionati

Colori: VITA classical A1–D4®: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
Colore Bleach: 0M1
Geometrie: 8 per i denti anteriori superiori, 4 per i denti anteriori inferiori, 4 x forme posteriori superiori & inferiori



VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Per la realizzazione di denti protesici

Colori: VITA classical A1–D4®: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
Colore Bleach: 0M1
Geometrie: Ø 98,4 mm/H 20 mm



VITA VIONIC® BOND

Fissaggio

Contenuto del kit: VITA VIONIC BOND I (vasetto, 2 ml)
VITA VIONIC BOND II (flacone, 1 ml)
Microbrush (3 pz.)



VITAVM® LC flow

Per la chiusura degli spazi interdentali e l'individualizzazione

Colori: disponibile tra gli altri in 5 colori gengivali



VITA AKZENT® LC

Caratterizzazione

Versioni consigliate: white, cream, pink, dark-red, blue, Glaze



Siamo a vostra disposizione.



Hotline Supporto vendite

Telefono: +49 7761 562-884
Fax: +49 7761 562-299
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Hotline tecnica

Telefono: +49 7761 562-222
Fax: +49 7761 562-446
Dalle 8:00 alle 17:00 CET
info@vita-zahnfabrik.com

Attenzione:

I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di queste informazioni d'uso: 2023-10

Con la pubblicazione di queste informazioni d'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile al sito www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE 0124

VITA VIONIC VIGO®, **VITA VIONIC® DENT DISC multiColor**,
VITA VIONIC® BOND, **VITAVM[®]LC flow**, **VITA AKZENT® LC**

gebdi DENTAL-PRODUCTS GmbH è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati CE

CE

VITA VIONIC® WAX,

Dental Direkt GmbH è certificata secondo la Direttiva sui Dispositivi Medici e i seguenti materiali sono marcati CE

CE 0482


VITA VIONIC® BASE DISC HI

I prodotti/sistemi di altri produttori citati in questo documento sono marchi registrati dei rispettivi produttori.

Rx only 

Riferimenti

UKR, Clinica universitaria di Regensburg,
Policlinico di Protesi Odontoiatrica,
n. report 2302_02, 4/2023

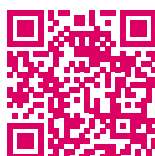

Altre informazioni
VITA VIONIC SOLUTIONS
www.vita-zahnfabrik.com/vionic



I prodotti VITA VIONIC SOLUTIONS si integrano alla perfezione con il nostro flusso di lavoro. La qualità delle protesi digitali non ha nulla da invidiare a quelle prodotte con il processo analogico. E con VITA abbiamo tutto da un unico fornitore.

Lukas Wichnalek
HIGHFIELD.DESIGN – Zahntechnik Wichnalek, Germania

VITA VIONIC® SOLUTIONS

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG

Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germania

Phone: +49 7761 562-0
Hotline: +49 7761 562-222
E-Mail: info@vita-zahnfabrik.com

Follow us on
Social Media!



www.vita-zahnfabrik.com